



## ALLGEMEINE PRODUKT INFOS

# aktivSYSTEM Intelligente Trainingssoftware

*Hauptaufgabe: Digitalisierung der Trainingsfläche*

Das aktivSYSTEM ist die Komplettlösung zur detaillierten Trainingsplanung, -steuerung und -dokumentation. Das Trainingssystem gewährleistet einen papierlosen und effizienten Trainingsablauf. Trainingspläne, Anamnesen etc. werden digital (am PC oder via App) erstellt. Ein am Trainingsgerät montierter workoutPOINT (aktivSYSTEM Device als Touch-PC oder Tablet) begleitet den Trainierenden mittels Biofeedback durchs Training und dokumentiert automatisch die Trainingsergebnisse. Diese stehen dem Therapeuten nachfolgend zur Leistungsbeurteilung und Therapiesteuerung zur Verfügung. Schnittstellen zum Verwaltungssystem sichern die lückenlose Übernahme von Patientendaten und realisieren die Einbindung und Übernahme der Trainingsergebnisse in die Patientenakte/den Arztbrief.

Optionale Softwaretools erlauben die Verwaltung von Kursangeboten, die Dokumentation von funktionellen Übungen, uvm.



*Eine Software für alle Belange der Digitalisierung im Bereich der Trainingstherapie!*

Einen Überblick über den Funktionsumfang des aktivSYSTEMS liefert das Produktvideo!




# Warum aktivSYSTEM?

## NACHRÜSTBAR

*Trainingsgeräte können mit den aktivSYSTEM nachgerüstet werden*

Dank spezieller Mess- und Fertigungsverfahren kann das aktivSYSTEM an allen Trainingsgeräten, unabhängig von Alter, Serie und Marke des Trainingsgerätes vor Ort in der Einrichtung nachgerüstet werden. Digitalisierung sichert so die Zukunftsfähigkeit der Bestandsgeräte.

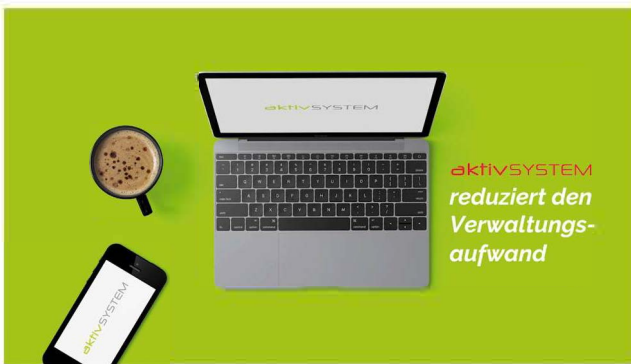

## INDIVIDUELL

*Auswahl zwischen zwei Editionen und diversen Programmkomponenten ermöglicht bedarfsgerechten Einstieg in die Digitalisierung*

Die Einrichtung entscheidet wie tiefgehend und umfangreich das aktivSYSTEM genutzt wird. Einfach, durch Standards und Vorlagen oder hochindividuell angepasst an die speziellen Bedürfnisse der Patienten.



## UNABHÄNGIG

*Das aktivSYSTEM arbeitet geräte- und herstellerunabhängig*

Motorisierte Trainingsgeräte, Sequenztrainingsgeräte und Ausdauertrainingsgeräte können - auch herstellerebergreifend - durch das aktivSYSTEM verbunden werden. Somit steuert eine Trainingssoftware die gesamte Trainingsfläche.



## VARIABEL

*Sie haben die Wahl:  
Datenspeicherung lokal oder in der aktivCLOUD*

Die Datenbank des aktivSYSTEMs kann in der von aktivKONZEPTE zur Verfügung gestellten aktivCLOUD oder auf einem von der Einrichtung administrierten Rechner installiert werden. Wir richten uns gerne nach Ihren Wünschen.



[www.aktivkonzepte.de](http://www.aktivkonzepte.de)


aktivKONZEPTE AG - Schlackenbergstr. 41b - 66386 St. Ingbert



**MEDcompany.at**

MTT Software Lösungen



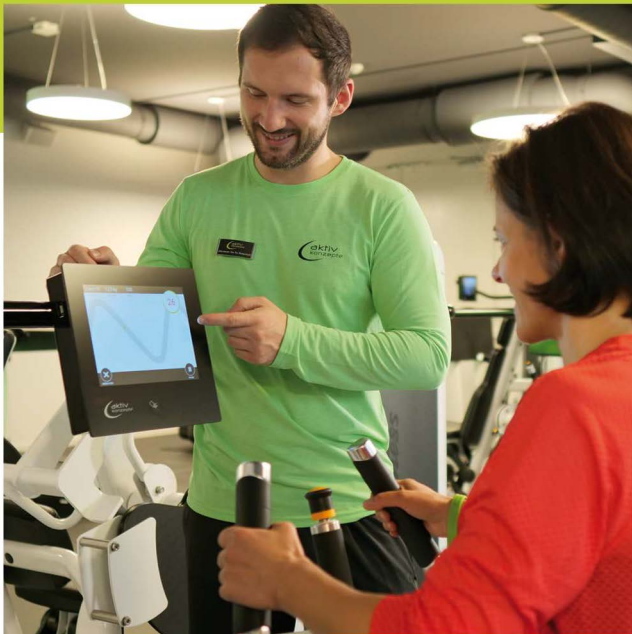

# aktivSYSTEM EDITIONEN

## ● ENTERPRISE

- Mini-PCs oder Tablets inkl. Sensorik am Trainingsgerät
- Biofeedback
- Automatische Dokumentation

## ● PROFESSIONAL

- Verzicht auf Mini-PCs/Tablets am Gerät
- Zugriff auf Trainingsplan via App und Terminals
- Manuelle Dokumentation via App und Terminals

## PRODUKTVERGLEICH

Produkt	Hauptaufgabe	Enterp.	Prof.	Betriebs-system
Server	Datenbank + Grundkommunikation	●	●	☐
Trainer	Therapeutenarbeitsplatz	●	●	☐ Apple Android
Device	Mini-PC/Tablet am Trainingsgerät	●	○	📱 Android
User	Station für funktionelle Übungen; Kurse, Kommunikation	●	●	☐ Apple Android
Member	App für Patient	●	●	Apple Android

● erforderlich   ● optional   ○ nicht kompatibel

## aktivSERVICE

*aktivSERVICE bedeutet direkte Ansprechpartner und permanente Aktualität der Software*

Die aktivKONZEPTE Hotline ist von Mo.- Sa. von 9:00 bis 21:00 Uhr erreichbar und sorgt durch kostenlose Updates und Upgrades für stetige Programmaktualität! Geschulte Mitarbeiter schalten sich bei Bedarf via Fernwartung auf PCs /Mini-PCs und sind direkter Ansprechpartner für Bedienfragen und technische Probleme.

## Lizenzmodell

*Bedarfsgerechte Lizenzierungsmöglichkeit durch Single- und Multi-User Lizenzen*

Durch die Single-User Lizenz findet man den einfachen Einstieg in die Digitalisierung. Erhöht sich der Bedarf, bietet die Multi-User Lizenz einer unbegrenzte Anzahl von gleichzeitigen Nutzern oder Endgeräte Zugriff auf das System. Die Member App ist selbstverständlich für alle Patienten nutzbar.





[www.aktivkonzepte.de](http://www.aktivkonzepte.de)

aktivKONZEPTE AG - Schlackenbergstr. 41b - 66386 St. Ingbert





## aktivSYSTEM DEVICE

Betriebssystem:   \* aktivKONZEPTE spezifische Betriebssystem und Mini-PC bzw. Tablethardware

# aktivSYSTEM Device (workoutPOINT Mini-PC od. Tablet) Der persönliche Therapeut am Trainingsgerät

*Hauptaufgabe: Mini-PC oder Tablet zur Patientenbetreuung und -begleitung am Trainingsgerät*

Der workoutPOINT ist der persönliche Therapeut am Trainingsgerät. Er stellt dem Patienten Informationen über die Übungen und die Geräteeinstellung bereit, um die Arbeit am Trainingsgerät zu erleichtern. Er leitet den Patienten während der Übung an und kontrolliert anhand der Trainingsvorgaben die Bewegungsausführung. Auskunft über die Qualität der Bewegungsausführung gibt die ermittelte Präzision. Die erzielten Trainingsergebnisse werden automatisch in der Datenbank gespeichert und können auf Wunsch via Schnittstelle in die Patientenakte übertragen werden.

## PRODUKTNUTZEN



### Biofeedback bringt Sicherheit

Patienten fühlen sich durch die Vorgabe/Messung von Bewegungsgeschwindigkeit und -reichweite sicher und gut betreut.



### Automatische Dokumentation

Die automatische Anzeige der Trainingsparameter und Dokumentation der Ergebnisse entlastet Patienten und Therapeuten gleichermaßen.



### Kommunikationsplattform

Die Übernahme von Routine- und Kontrollaufgaben (Belastungsanpassung etc.) steigert die Personaleffizienz und den Therapieerfolg.



[www.aktivkonzepte.de](http://www.aktivkonzepte.de)

aktivKONZEPTE AG - Schlackenbergstr. 41b - 66386 St. Ingbert



**MEDcompany.at**

MTT Software Lösungen




# aktivSYSTEM Trainer

## Der Manager für den Therapeuten

*Hauptaufgabe: Trainingsplanung & Patientenverwaltung*


Der aktivSYSTEM Trainer ist die Managementzentrale der Software. Hier erfasst der Therapeut die Patienten, erstellt Trainingspläne und Vorlagen, dokumentiert Leistungs- und Gesundheitstests und informiert sich über die Leistungsentwicklung der Trainierenden. Dies kann sowohl am zentralen Arbeitsplatz via PC/MAC oder einem Tablet- bzw. Smartphone-App geschehen. Ausführliche Statistiken und Auswertungen ermöglichen einen Überblick über das Trainingsgeschehen, die Aktivitäten der Therapeuten und die Auslastung der Trainingsfläche.

### PRODUKTNUTZEN

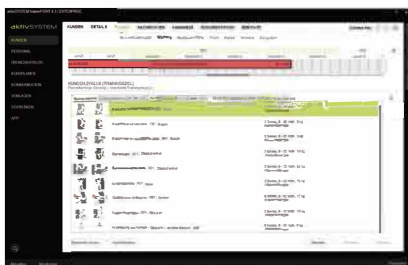


#### Einfache Trainingsplanerstellung

Trainings- und Heimtrainingspläne können schnell und einfach mittels Vorlagen zugewiesen oder patientenindividuell erstellt werden.

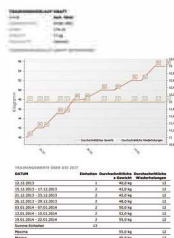

#### Leistungsentwicklung im Blick

Die automatische Dokumentation und Visualisierung der Leistungsentwicklung dient als Grundlage der Trainingssteuerung.

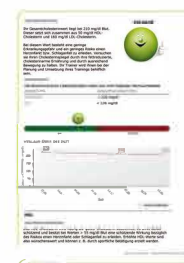

#### Platz für Individualität

Anamneseformulare, Übungen, Berichte, Dokumentationen und Vorlagen können ergänzt und/oder eigenständig angelegt werden.



## aktivSYSTEM Member Die App für Patienten/Trainierende

*Hauptaufgabe: Orts- und zeitunabhängiger Zugriff auf Trainings-/Kursdaten, Dokumentation & News*

Die Patientenapp aktivSYSTEM Member ist die ideale Ergänzung zu den Grundmodulen des aktivSYSTEMs. Mit der auf die Einrichtung individualisierten App, haben Patienten/Trainierende Zugriff auf den vom Therapeuten erstellten Trainingsplan. Die App bietet so die Möglichkeit der einheitlichen Übungsanleitung aus der Behandlungskabine heraus, über die MTT bis zur ambulanten Nachbetreuung. Mit Hilfe der Onlinedokumentation hat der Therapeut detaillierte Einblicke in die Trainingsaktivität der Patienten und kann nach Bedarf Anpassungen vornehmen.

### PRODUKTNUTZEN



#### Geführtes Training

Die App zählt und dokumentiert Belastungsdauer und Wiederholungen automatisch und gibt Hinweise zur Bewegungsgeschwindigkeit.



#### Geringer Verwaltungsaufwand

Alle Produkte greifen auf die gleichen Daten zurück, daher sind alle Trainingspläne und Kurse ohne zusätzlichen Pflegeaufwand aktuell.




#### Kommunikationsplattform

Über Notifications werden Patienten zum Training motiviert und zentral, stressfrei über News/Änderungen informiert.





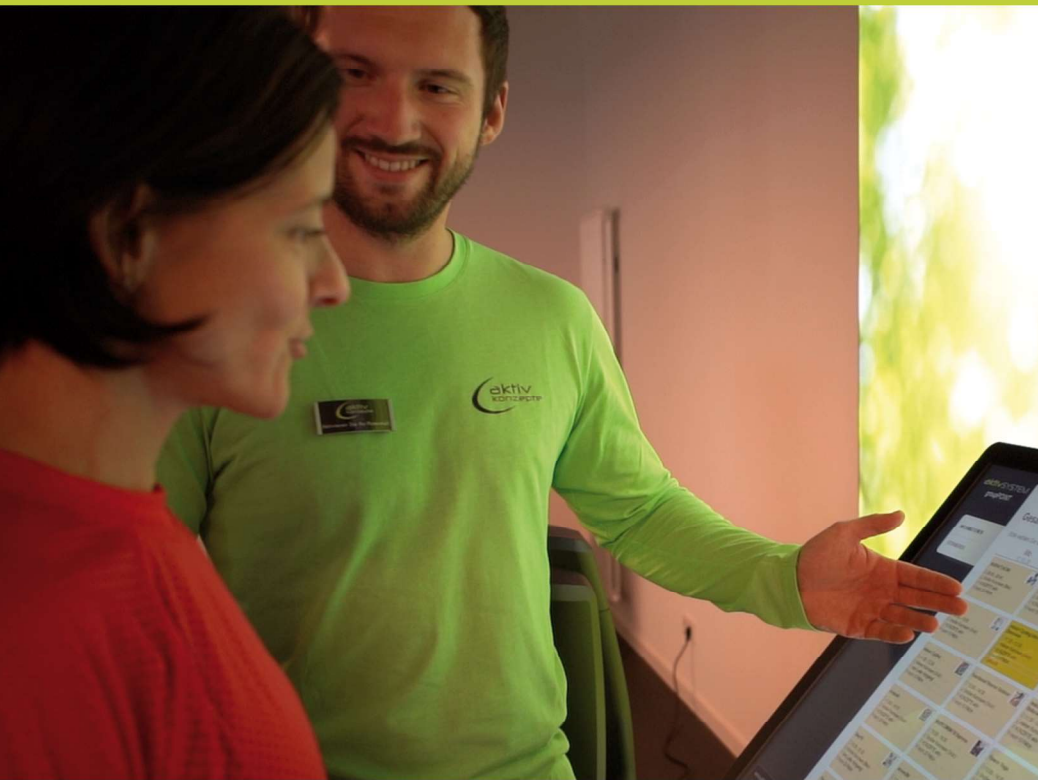

# aktivSYSTEM User

## Die Station für funktionelle Übungen, Kurse und Dokumentation

*Hauptaufgabe: Training & Dokumentation freier Übungen, Kursbuchung und Kommunikationszentrale*


Über den aktivSYSTEM User können funktionelle Übungen (Hantelübungen, Dehnübungen sowie Kräftigungs- und Koordinationsübungen) mit einem virtuellen Trainer durchgeführt und direkt am Terminal, Tablet oder Smartphone dokumentiert werden. „Papierkrieg“ und „Zettelwirtschaft“ entfallen und die gesamte Trainingsfläche ist digitalisiert. Die Trainierenden können über die integrierte Trainingsplanung ihr Training autark optimieren und die persönliche Trainingshistorie analysieren. Über den aktivSYSTEM User können überdies Kurse präsentiert und gebucht werden.

### PRODUKTNUTZEN




#### Training funktioneller Übungen

Funkt. Übungen werden am aktivSYSTEM User Device anhand von Übungsvideos, Bildern und Beschreibung ausführlich erklärt.

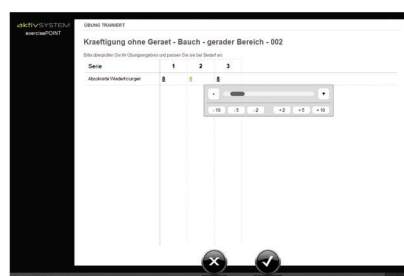

#### Übungsdokumentation

Trainingsergebnisse können direkt nach Übungsende dokumentiert werden und stehen zur Auswertung zur Verfügung.

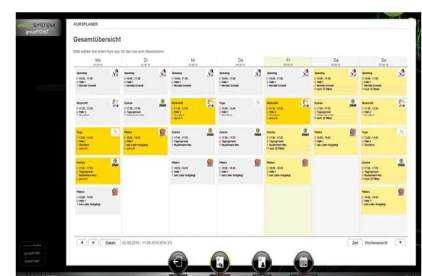

#### Kursangebot im Überblick

Einfache und übersichtliche Darstellung des gesamten Kursangebots inkl. bedienfreundlicher und transparenter Buchungsmöglichkeit.

